




# Chlor-Clean Wipes

**Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.**

- działanie biobójcze przeciwko: *C.difficile*, *C.difficile* O27, *C.sporogenes*, *C.perfringens*, *B.subtilis*, *B.cereus*
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- przebadane wg normy EN 16615 oraz EN 17126
- doskonałe właściwości myjące
- długi okres przydatności do użycia

Preparat do użyciu profesjonalnego.  
Produkt biobójczy - pozwolenie  
nr 6741/16 (Kat. I, gr. 2)

# Chlor-Clean Wipes

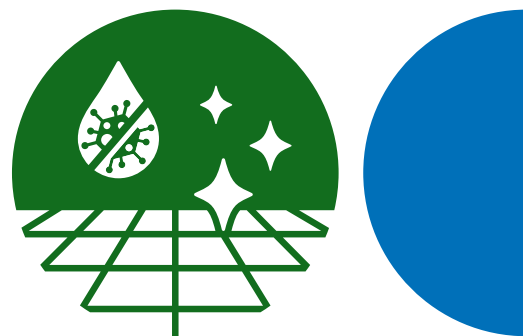

**Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi.**

## PODSTAWOWE CECHY

- wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (C.difficile, C.difficile O27, C.sporogenes, C.perfringens, B.subtilis, B.cereus) potwierdzone badaniami
- dodatkowo przebadane zgodnie z normą EN 16615 i EN 17126
- 1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm
- doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów myjących
- zalecane do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydaliny oraz innych zabrudzeń organicznych
- wygodne i łatwe w użyciu - inkrurowana chlorem chusteczka jest aktywowana jedynie poprzez nasączenie jej zimną wodą
- szczególnie zalecane do stosowania w miejscach, w których obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny oraz w sytuacjach zagrożenia epidemicznego
- wysoka jakość włókniny i optymalny wymiar chusteczki (60 g/m<sup>2</sup>, 19 cm x 24 cm)
- długi okres przydatności do użycia - 24 miesiące

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.  
Przed użyciem zawsze wkładać rękawice i fartuch.  
Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu.

## SKŁAD CHEMICZNY

**100 g płynu zawiera:**  
substancja czynna - Troklozen sodu  
(sól sodowa kwasu dichloroizocyanurowego  
CAS 2893-78-9) - 96 g; dodatek detergentu:  
sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

### Chusteczki wykazują działanie:

- bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze w warunkach brudnych - 15 min.
- sporobójcze przeciwko: - B.cereus, C.difficile (warunki brudne) - 2 min., C.difficile O27, C.perfringens, B.subtilis (warunki czyste) - 15 min.
- C.sporogenes (warunki czyste i brudne) - 60 min.
- wirusobójcze (warunki brudne) wobec Polio, Adeno i Noro - 5 min.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

## OPAKOWANIA

Chlor-Clean Wipes - opakowanie flow-pack  
- 25 szt. chusteczek

### ogólna dezynfekcja powierzchni

Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie.



Upewnij się, że z kranu płynie zimna woda, po czym środek chusteczki nasączaj zimną wodą przez jedną, bądź dwie sekundy.



Wyciśnij chusteczkę nad zlewem w celu usunięcia nadmiaru wody (upewnij się, że został wyciśnięty nadmiar wody).



Umyj i zdezynfekuj powierzchnię przy użyciu chusteczki. Pozostaw powierzchnię zwilżoną, ale nie moką. W celu osiągnięcia pożądanego spektrum biobójczego, odczekaj zalecany czas ekspozycji (od 5 do 15 minut).



### dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych organicznie i usuwanie plam krwi

Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie.



W przypadku większych plam możesz potrzebować kilku chusteczek.

Położ chusteczkę/ki bezpośrednio na plamę i poczekaj, aż się wchłonie.



Użyj kolejnej chusteczki nasączonej wodą zgodnie z ww. instrukcją użycia, celem ostatecznego umycia i zdezynfekowania powierzchni.



Usuń wszystkie zużyte chusteczki jako odpad medyczny.



**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

## WYTWÓRCA:

**Guest Medical Limited**  
Unit A6, Larkfield Trading Estate  
Aylesford, Kent. UK. ME20 6SW  
Wielka Brytania  
www.guest-medical.co.uk

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2109-02



medilab.pl